

Eine Auswahl aus unserem Sortiment

XXL544 Gleitmatratze bis 544kg Patientengewicht



Die XXL Gleitmatratze ist eine luftgefüllte Matratze, die es ermöglicht, sehr schwergewichtige Patienten (bis 544kg Körpergewicht) schonend, schnell und einfach zu transferieren.



Dabei wird der Patient sehr schonend behandelt und die Pflegekraft, der Rettungsdienstmitarbeiter oder der Arzt erheblich entlastet.



Die Verletzungsgefahr beim Transfer ist im Vergleich zu herkömmlichen Transfers ohne besondere Hilfsmittel ganz erheblich vermindert.



Sie erhalten:

Praktisch verpackt und einfach zu verstauen:




Ablauf

Die XXI Gleitmatratze wird gerollt an den Patienten gelegt; der Patient wird über den eingerollten Rand der Matratze gedreht.



Der Patient wird auf der Matratze gesichert.

Der Patient wird mit der Matratze verschoben.

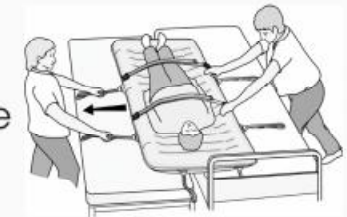

Technische Daten:

Maximales Patientengewicht: 544kg
 Matratzengewicht: 1,6kg
 Maße Größe 1 [cm]: B x L x T: 81 x 198 x 15
 Maße Größe 2 [cm]: B x L x T: 117 x 198 x 15
 Maximaler Matratzen-Luftdruck: 0,26bar (3psi)
 Min / Max Betriebstemperatur: +49°/-51°C
 Kompressor Spannung Netz: 230v; 700W; 50Hz
 Leistung - Sicherung: 1 x 5A (T) Fuse
 Min / Max Betriebstemperatur: +35°/+5°C
 Doppelte Isolierung / Klasse II Produkt