




**Technische Daten des adicare Bettes XXL 400 Klinik**

- Sichere Arbeitslast: 400 kg
- Bettmaße oberer Rahmen [cm]
- BASIC Version
  - 231 x 128
- COMFORT Version\*
  - Eingezogen: 231 x 100
  - Ausgezogen: 251 x 128
- Liegeflächenraster [cm]:
  - 90 x 200 bis 220
  - 105 x 200 bis 220
  - 120 x 200 bis 220
- Betthöhenverstellung [cm]:
  - 39 (43) bis 82 (86) - in Klammern: mit eingebauter Waage
- Liegeflächeneinstellungen:
  - Oberkörper 0° bis 54°
  - Kniebeuge 0° bis 24°
  - Bodenfreiheit: 15 cm
  - Trendelenburgverst. + 18° / - 18°
- Räder: 4x 145 mm, antistatisch
- dreifache Radsteuerung: Bremse, 360°, je 1x Richtungsfestst.
- Fuß- und Kopfplatte wasserfest und sehr leicht zu entfernen
- Abstandsrollen: 4x fest montiert
- IV -Ständer: am Kopf- / Fußende\*
- Wäschekorb\* unter dem Bett
- Kabelfernbedienung mit Sperre
- Zentralsteuerung\* mit Trendelenburgbedienung
- CPR Funktion (Notabsenkung)
- Batterie bei Stromausfall
- Stoßklasse 1; Nässechutz: IP 66
- Gewicht: 175 kg; 195 kg mit Waage
- Optionaler Doppelrohr-Bettgalgen
- Optionale geteilte Seitengitter als Ein- und Ausstieghilfe (\* in Comfort-Version)

**Als Spezialanbieter für Adipositasbedarf**

können wir Ihnen ein Spezialbett anbieten, das punktgenau auf die Erfordernisse der Pflege von adipösen Patienten, der Entlastung des Pflegepersonals und die baulichen Gegebenheiten von Kliniken konzipiert wurde. Zur Komplettierung erhalten Sie adicare Spezialmatratzen und Mobilitätshilfen.

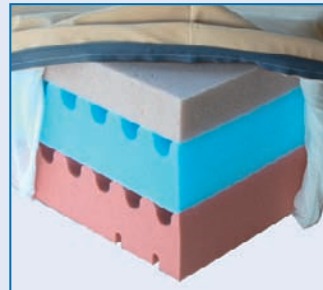

**XXL adicare Anti-Dekubitusmatratzen bis 450kg**



Die adicare Spezial Adipositas Matratzen sind aus unterschiedlichen Schaumstoffen (ggf. mit „Visco“) gefertigt, haben einen kliniktauglichen Bolanbezug mit verdecktem Reißverschluss, handliche Matratzengriffe zum einfachen Transport und sind bis zu 350kg Patientengewicht geeignet. Entweder als **BASIC** Ausführung zur „Standardversorgung“, als **med1** (Deku1 / VAS 3) oder als **med2** Variante (Deku2 / VAS 5). Aktive Druckentlastungssysteme (Luft) bis 450kg erhältlich.

Art.-Nr.: 080650

Aktuelle Preise unter [www.simplybig.eu](http://www.simplybig.eu)



**Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme**

**Webshop:** [www.simplybig.eu](http://www.simplybig.eu)  
**Adipositas-Info:** [www.adicare.eu](http://www.adicare.eu)  
**eMail:** [mail@adicare.eu](mailto:mail@adicare.eu)

**Kontakt in Deutschland**

Tel. +49 (0) 1801 -020 6603 660  
 Fax +49 (0) 3222-1635183

**Kontakt in der Schweiz**

+41 (0) 7 16 70 16 37  
 +41 (0) 7 16 70 16 38

ASCURO AG • Konstanzerstr. 20/22 • CH-8280 Kreuzlingen

**Warenversand aus unserem Lager Deutschland**

Klinikbett XXL 400 08/11

*adipositas*

*Adipositas Versorgung mit Kompetenz*

**Klinikbett XXL 400 mit variabler Breiten- und Längen Anpassung**



Europas erster **auf Adipositas spezialisierter Komplettanbieter** von Hilfsmitteln und Einrichtungsgegenständen für Kliniken, REHA, Arztpraxen, Pflegedienste, Alten- und Pflegeheime und Zuhause

*adipositas*

## Adicare XXL 400 Klinik: Variable Breiten- & Längenverstellung



Zentralsteuerung



Handbedienung




Wäscheablage

Das XXL 400 Klinik von adicare ist ein Klinikbett mit besonderen Qualitäten: Die Liegefläche ist beim Modell COMFORT manuell in der Breite von 90 auf 120cm und in der Länge von 200 auf 220cm variabel zu verstellen: Durch kurzfristige Verstellung kommen Sie so durch schmale Türen. Weitere Eigenschaften (je nach Modell): Wandabstandshalter, Infusionshalter, zweigeteilte Bettgitter als Ausstiegshilfe, ein Doppelrohrgalgen, Zentralbremse und Richtungsarretierung, Trendelenburg und Anti-Tr., Sitzposition, Zentral- und Handsteuerung, Akku, eingebaute Waage u.v.m.

Art.-Nr.: 080120



Breitenverstellung

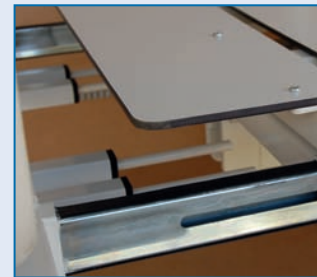

Längenverstellung



Variable Bettgitter



IV-Halter & Wandabweiser

Aktuelle Preise unter [www.simplybig.eu](http://www.simplybig.eu)